

取扱説明書

型番:C-WFT20W



保証期間: 購入日より6ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。

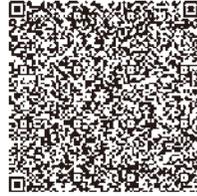

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1


EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)


お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

●内容物

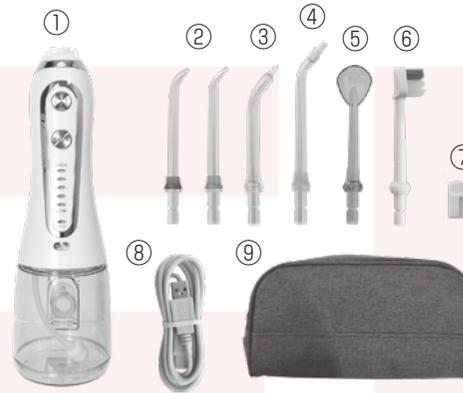


- ①本体 ②標準ノズル2本 ③極細ノズル
- ④プラシノズル ⑤舌クリーナー
- ⑥歯ブラシノズル ⑦充電ポートカバー
- ⑧USBケーブル ⑨ポーチ

●各部名称

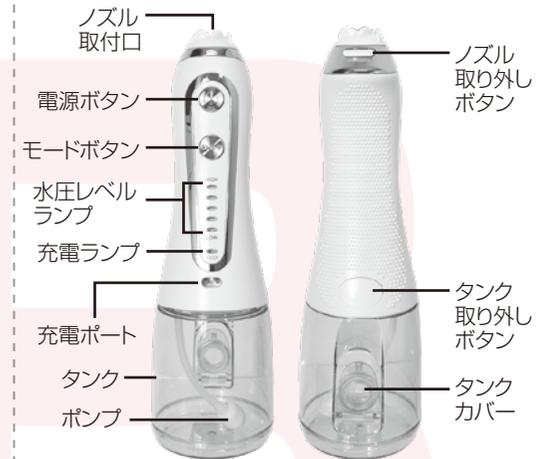

●充電方法

①本体の充電ポートに付属のUSBケーブルを、方向に注意して差し込みます。反対側をUSB-ACアダプタに差し込みます。(5V 1A以上推奨)

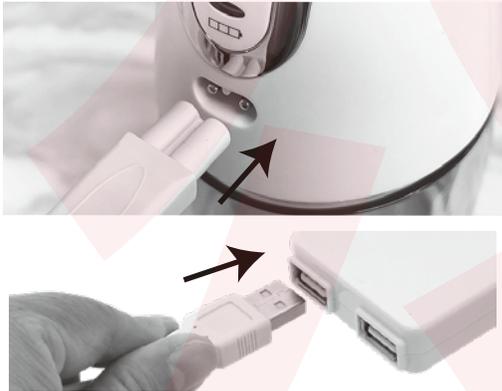

②充電中は充電ランプが青点滅します。満充電になると青点灯に変わります。ケーブルを抜いてください。

③充電後必ず充電ポートに、付属の充電ポートカバーを取り付けてください。取り付けない場合、ここから内部に水が入り、故障の原因となります。



充電ポートカバー

●水を入れる

タンクに水を入れるには2つの方法があります。

◆タンクを取り外して水を入れる
タンク取り外しボタンを押しながら、本体上部を上を持ち上げると外れます。タンクに水をいれて、本体上部をカチッと音がするまで上から押し付けてください。



◆タンクに直接水を入れる
本体後ろのタンクカバーを開けて、水をいれます。入れ終わったら、しっかりとカバーを閉めてください。

水は完全に満杯になるまで入れないで下さい。少し余裕をもった量にしてください。



●ノズルの取付

◆取付
ノズルを取付口に押し込みます。カチッと音がするまで押し付けてください。取付後、引っ張っても外れないか必ず確認してください。



◆取り外し
ノズル取り外しボタンを中心方向に押しすと、ノズルが外れます。



ノズルの取付・取り外しの際は、絶対に電源が切れている状態で行ってください。

⚠ 注意

歯や歯ぐきを傷めないために

自分で操作ができない方には使用させない。
口腔内の感覚が弱い方は使用しない。

ケガ・歯や歯ぐきを傷める原因。

歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医に相談のうえ使用する。

ケガ・歯や歯ぐきを傷める原因。

口腔洗浄以外の目的に使用しない。

目、鼻や耳、喉などに水流をあてると事故・ケガの原因。

タンクに40度を超える湯水を入れない。
やけどの原因。

ノズルは家族や他人と共有しない。
感染・炎症の原因。

人間以外使用しない。
ケガの原因。

● 使い方

①ノズルの方向を調整します。
360度回転することができます。



②モードボタンを押し、水圧を調整します。ボタンを押すごとに下のランプが点灯します。HIGHになるほど水圧が高く(強く)なります。**最初は一番低いモードでのご使用を推奨します。**



モードボタン

HIGHになるほど
水圧が高くなる

③電源ボタンを押すと、ノズルから水がでます。ボタンを押すとすぐに水が出てくるのでご注意ください。

電源ボタン




④歯間や歯の裏側にノズルの先を入れて、水の勢いで汚れを取り除きます。



⑤歯の矯正をしていて標準ノズルでは水があたらない場合、極細ノズルやブラシノズルをご使用ください。掃除する場所により、ノズルを変えてお使いください。
※ノズルを変える際は、絶対に電源が切れている状態で行ってください。

⑥舌クリーナーは、奥から手前に動かしてご使用ください。最初水圧は一番弱いモードにし、徐々に水圧を上げてください。

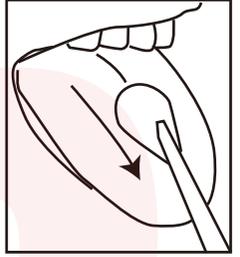

使用中は、勢いよく水が出てきます。周りに水が飛び散る可能性がありますので、必ず濡れてもいい場所でご使用ください。

⑦電源を入れて2分後に自動的に電源が切れます。続けて使用する場合は、電源ボタンを押してください。また電源が入った状態で、もう一度電源ボタンを押すと電源は切れます。

タンクの水は満タンにした場合、一番強い水圧で約1分間、一番弱い水圧で約2分間使用することができます。使用中にタンクの水がなくなった場合は、一度電源を切ってから、タンクに水を入れてください。

● お手入れ

使用后、タンク内の水をすべて出してください。そのあとタンク内に水がない状態で電源を入れ、ポンプチューブ内に残った水を全て出してからお手入れを行ってください。

◆本体
ノズルとタンクを外し、水洗いをしてください。(洗剤は使わないでください)**必ず充電ポートカバーをつけた状態で洗ってください。**余分な水分をふき取った後、しっかりと自然乾燥させてください。

◆ノズル
本体から外した後水洗いしてください。(洗剤は使わないでください)余分な水分をふき取った後、しっかりと自然乾燥させてください。

◆タンク
カバーを開け、中の水を完全に出してください。余分な水分をふき取った後、カバーを開けたままでしっかりと自然乾燥させてください。

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が **10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)** の範囲で充電してください。

●温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。

●充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

保管するときは約50%充電状態で

バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。

充電ケーブルを差し、使い切った状態から3時間程度充電してケーブルをはずしてください。

涼しい場所で保存してください。

高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。

・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。

・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。

・充電可能回数は約300回です。

● 仕様

サイズ	幅72×高さ240×奥行85(mm)
重さ	320g
付属品	本体、標準ノズル2本、極細ノズル、ブラシノズル、舌クリーナー、歯ブラシノズル、USBケーブル(120cm)、充電ポートカバー、ポーチ、日本語説明書
電源	USBより充電(5V 1A)
消費電力	5W
バッテリー	リチウムイオン 2500mAh 3.7V
充電時間	約6時間
稼働時間	約30分(1回の連続稼働時間2分)
タンク容量	300ml
パルス	約1200回/分
水圧	5段階調整 37～137psi(255～944kpa)
防水	IPX7
パッケージサイズ	幅122×高さ250×奥行78(mm)
パッケージ込重	564g

● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

⚠ ご注意

※ノズルの付け替えは必ず電源が切れている状態でおこなってください。

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※水道水以外使わないでください。

※タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい水と入れ替えてください。

※分解しないでください。

※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。