

取扱説明書

型番:SUDUSTBS



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様


サイズ	スタンド:幅54×高さ192×奥行50(mm) 電動ブラシ:幅20×高さ248×奥行23(mm)
重さ	スタンド:135g 電動ブラシ:114g
付属品	スタンド、ブラシヘッド、ブラシハンドル、カップ、USBケーブル(75cm)、日本語説明書
電源	USBより充電及び給電
電動ブラシ	バッテリー:800mAh 充電時間:約12時間 稼働時間:約3時間 入力:5V/1A 消費電力:1W±0.7W 振動回数:31000回/分 防水性能IPX7
スタンド	入力:5V/1A UV照射時間:15分 乾燥時間:30分 ※防水仕様ではありません
対応供給電流	1.0A以上
パッケージサイズ	幅80×高さ203×奥行60(mm)
パッケージ重量	388g

セット内容




①スタンド ②カップ ③ブラシヘッド
④ブラシハンドル ⑤USBケーブル(75cm)

各部名称

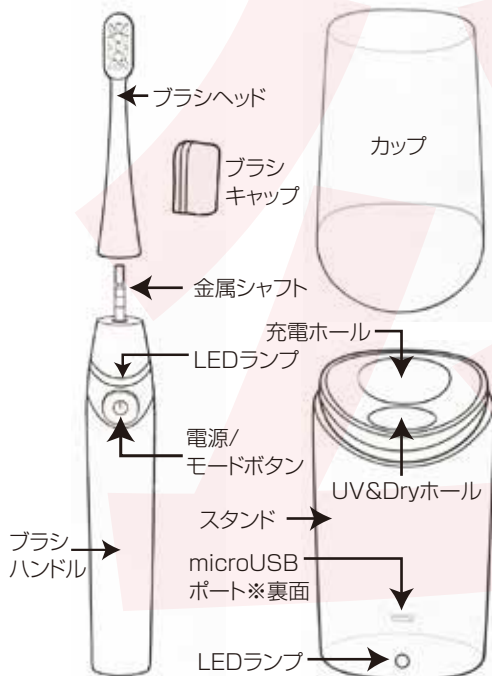

電動ブラシの充電

①スタンドのmicroUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込みます。LEDランプが青に点灯します。

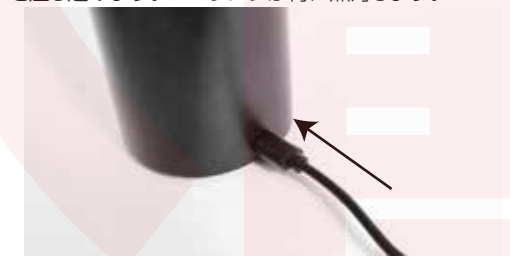

②ケーブルの反対側をUSB-ACアダプタ(別売)などに差し込みます。

③ブラシハンドルを充電ホールに差し込みます。※どの向きで差ししても充電可能です



④充電中はブラシハンドルの電源ボタン上にあるライトが赤に点滅します。満充電になるとライトが青点灯に変わります。

LEDランプ
充電中:赤点滅
満充電:青点灯



初めて使用する前に、満充電になるまで電動ブラシを充電して下さい。(約12時間)


● ブラシヘッドのUV照射・乾燥

①スタンドのUV&Dryホールのキャップを外し、使用後のブラシヘッドを差し込みます。しっかり奥まで入れて下さい。ブラシの方向は右図を参考にしてください。



● ブラシヘッドのUV照射・乾燥(続き)

②UV&Dryホールにブラシヘッドを差し込むと、2秒後にスタンドのLEDランプがゆっくりと赤点滅し、UV照射と乾燥がはじまります。UV照射は15分後に自動的にストップし、赤点滅が青点灯に変わります。その後15分後に乾燥が完了します。LEDランプの色は変わりません。最低週1回程度のUV照射&乾燥をおすすめします。

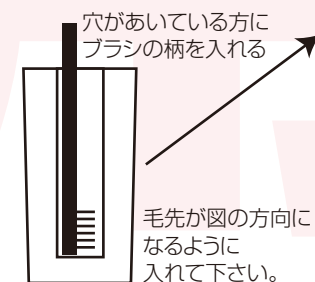

LEDランプ
UV照射:赤点滅
それ以外:青点灯

● 電動ブラシの準備

◆取り付け
ブラシヘッドをブラシハンドルにさしこみます。ブラシの毛先がハンドルの電源ボタン側にくるように調整し、金属シャフトに奥までさしこみます。方向を間違えると、奥までブラシヘッドを差し込むことができません。



◆取り外し
ブラシハンドルをしっかり持ち、ブラシヘッドを真上に引き抜いて取り外してください。

歯磨き剤をご使用の場合、ブラシの毛先に少量の歯磨き剤をつけます。水の飛び散りを防ぐため、電源を入れる前にブラシを口の中に入れます。

● 電動ブラシの手入れ

ブラシヘッドを外します。(電動ブラシの準備参照) ブラシヘッドを十分に水洗いして下さい。余計な水分を落とした後、最低週に1回程度【ブラシヘッドのUV照射・乾燥】の項を参照に手入れして下さい。

ブラシハンドルを水洗いします。ブラシハンドルは水の中につけたまま放置しないでください。

ブラシ、ハンドルとも水分をふき取り保管します。

● 電動ブラシの使い方

電源ボタンを押す回数によってモードが変わります。
1回…電源オン/高速振動/LEDランプ青点滅
2回…低速振動/LEDランプ青ゆっくり点滅
3回…高速&低速交互に繰り返し/LEDランプ高速点滅
4回…電源オフ




モード中でも電源ボタンを長押しすると、電源を切る事ができます。また電源を切って、再度電源オンにした場合、前回のモードから開始します。使用后2分で自動的に電源がオフになります。

● スタンドの手入れ

スタンドは防水仕様ではありません。
汚れは布でふき取って下さい。充電ポートなどの電源部は絶対に濡らさないようにして下さい。またスタンドを濡れやすい場所には置かないでください。

● テストモードについて

◆30秒お知らせタイマーについて
全てのモードで30秒ごとに1回、一瞬停止し、再び動きます。これは磨き時間の目安をお知らせしています。下図のように歯を4つに分け、それぞれの箇所を30秒ブラッシングすると、むらなく歯全体を磨く事ができます。

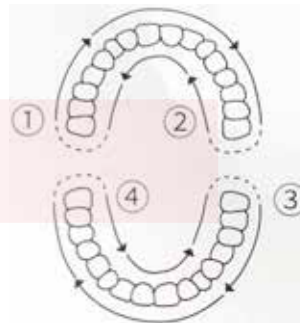

本製品にはテストモードがあります。このモードを選択すると、再び電源ボタンを押すか、充電がなくなるまで動作し続けます。また30秒お知らせタイマーは動作しません。

- ①電源が切れた状態で、電源ボタンを5秒ほど押し続けます。
- ②LEDランプが青に点灯します。
- ③電源ボタンから指を離すと振動しはじめます。(テストモード)テストモード時は高速振動になります。それ以外を選択する事はできません。
- ④電源ボタンを押すと電源がオフになります。

⚠️ ご注意

- ※やりに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤は使用しないでください。
- ※歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、一か所に長くブラシをあてないでください。
- ※口腔内の感覚が弱い方は怪我をしたり歯や歯ぐきを痛める可能性がありますので、使用しないでください。
- ※自分で操作できない方は使用しないでください。
- ※お子様が使用する場合、必ず大人の方がそばについている状態で行って下さい。
- ※ブラシは家族や他人と共用しないでください。
- ※ブラシはお口のお手入れ以外に使用しないでください。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。