


# 取扱説明書

## 型番:S-AMA21W

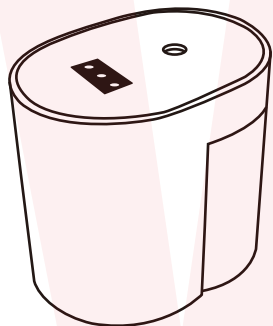

**保証期間： 購入日より6カ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

### ●仕様

サイズ	幅105×高さ220×奥行55(mm)
重さ	138g
付属品	本体、USBケーブル、交換用綿棒、日本語説明書
電源	USBより充電
入力	DC5V 1A
消費電力	2W
バッテリー	2000mAh
充電時間	約4時間(5V 1Aで充電した場合)
稼働時間	約6時間
連続稼働回数	約1500回(状況により異なります)
タンク容量	100ml
ケーブル長	100cm(コネクタ部含む)
素材	ABS/PP/PCBA
パッケージサイズ	横100×高さ80×奥行65(mm)
パッケージ込重量	200g


※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合がございます。

### ●内容物・各部名称

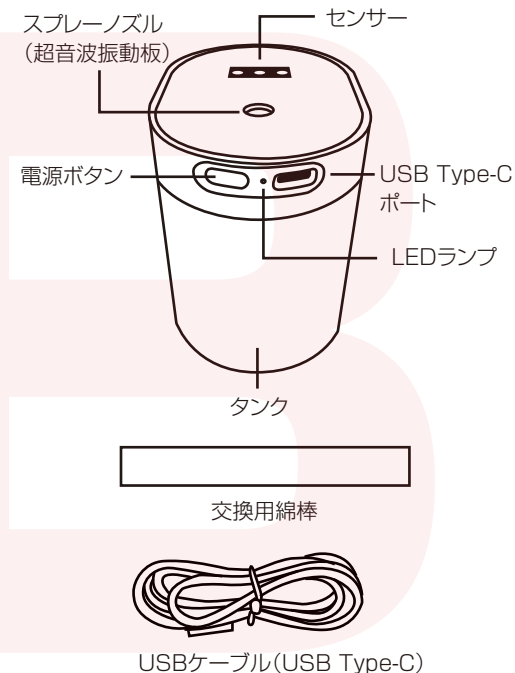


### ●充電方法


①本体のUSB Type-cポートに、付属のUSBケーブルを接続します。

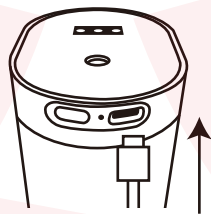

②USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に挿し込みます。

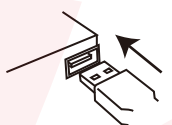

③充電中はLEDランプが赤に点灯します。満充電になると緑点灯に変わりますので、USBケーブルを抜いてください。  
本製品は充電しながら使用することもできます。

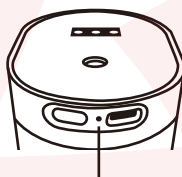


充電中:赤  
満充電:緑


バッテリー残量がない場合、電源ボタンを押すとLEDランプが青く3回点滅します。その場合充電してください。

### ●消毒用アルコールをいれる

①タンクを左に回すと、本体からタンクが外れます。

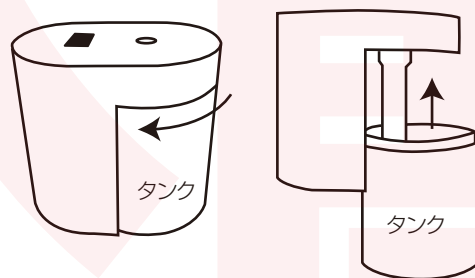


②消毒用アルコールをタンクの80%ぐらいまで入れます。※満タンになるまで入れないでください。

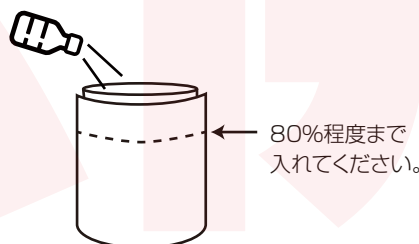

80%程度まで入れてください。

③中のアルコールをこぼさないようにタンクを本体にとりつけます。

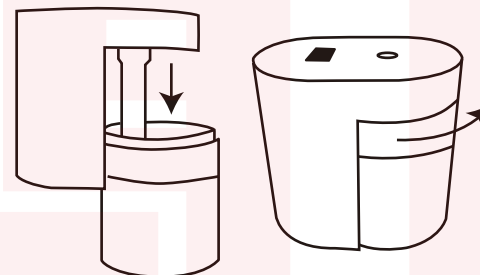


アルコールが入った状態で本製品を移動させる場合は、中身がこぼれないようにご注意ください。  
**かならず水平な状態で運んでください。**  
**本体を傾けたり逆さにしないでください。**

### ⚠️ ご注意


- ※アルコール75%程度の物の使用を推奨します。
- ※ジェルタイプの消毒液やハンドソープ、ボディソープなどの粘着度が高い液体は使用できません。
- ※アルマオイルは使用できません。
- ※水・アルコール以外のものをいれないでください。
- ※ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で作業しないでください。
- ※製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。

## ● 使い方

①電源ボタンを押すと、センサー中央が3秒間青点灯し、動作を開始します。

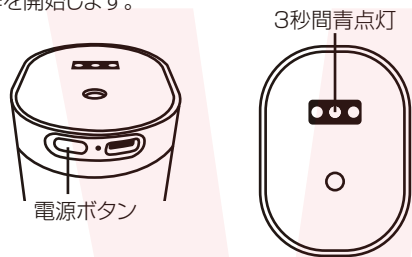

②センサーに手をかざすと、センサー中央が青点灯し、ミストがでます。ミストは10秒後に自動的に停止します。

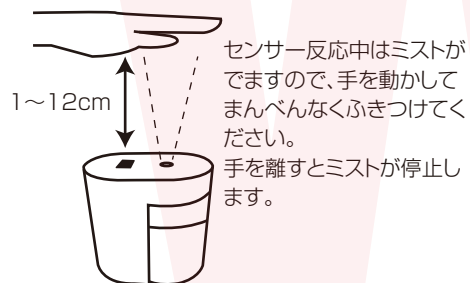

使用中センサー面や超音波振動板がアルコールで濡れた場合は、こまめにティッシュなどでふき取ってください。




## ● 自動オフについて

本製品は**24時間動作しない**(センサーが感知しない)場合、自動的に電源がオフになります。その場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。

## ● お手入れ

◇タンク・綿棒ケース

汚れを水道水などで洗い流し、水分をふき取ったあとで自然乾燥させてください。

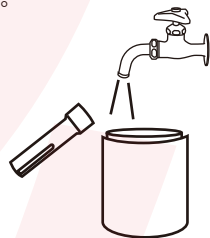


◇本体

スプレーノズル付近に液だれがある場合は、ティッシュなどでふき取ってください。

本体は固く絞った柔らかい布で汚れをふき取ってください。

※絶対に水につけたり、ぬらさないでください。

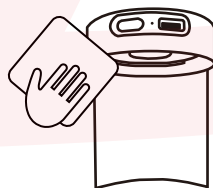


## ● 綿棒の交換


交換目安:

毎日1日でタンク全量使用した場合約3カ月。  
ミストが出にくくなったり、あきらかに綿棒の色が変わる、ニオイが気になる場合は交換してください。


①タンクを外すと、中に綿棒の入ったケースがあるので、本体から引き抜いてください。

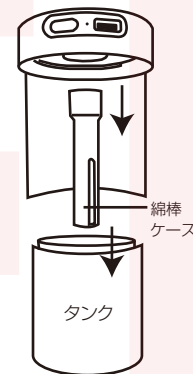

②ケースの中の綿棒を取り出し、付属の交換用綿棒を入れます。

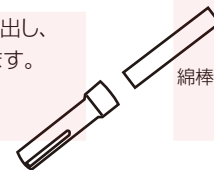


③綿棒ケースを元に戻します。しっかり奥まで差し込んでください。

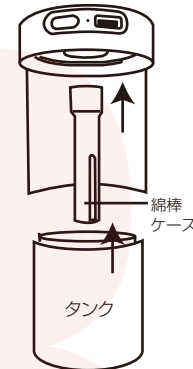

④タンクを取り付けます。

交換の際、できるだけ本体を逆さにしたり斜めにむけたりしないでください。

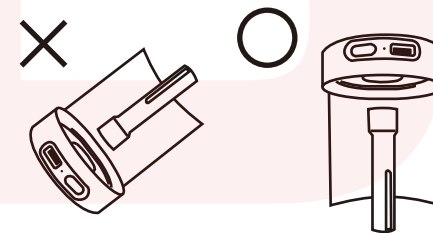

## ⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※絶対に火気の近くで使用しないでください。
- ※アルコールをタンクにいれる際、発熱機器や火気の近くで行わないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さなお子様だけのご使用はおやめください。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。